

アルミブロック恒温槽



ペルチェ素子を2個用いた、幅広い用途にお使い頂ける強力な小型精密アルミブロック恒温槽

2点温度補正機能付

豊富なオプションブロック (Bタイプ: 別売)

アルミブロック恒温槽

チルヒート **CHT-101**

使用温度範囲 **0°C ~ +65°C**

温度調節精度 **±0.1°C ~ ±0.5°C**

CHT-101 仕様

型名	CHT-101
使用温度範囲(°C)	0 ~ +65
温度調節精度(°C)	±0.1 ~ ±0.5
最小設定温度単位(°C)	0.1
温度調節	PID制御(2点温度補正機能付)
温度表示	大型デジタル表示(実測温度・設定温度同時表示)
冷却/加熱方式	ペルチェ素子×2
ブロック取付可能数	1個
アルミブロック	別売(Bタイプ)
外形寸法(mm)	W220xD300XH160
重量(kg)	約4.3(アルミブロックを含まず)
電源	AC100V 50/60Hz 3A
標準価格(税別)	198,000円


*ご使用の際はアルミブロック (Bタイプ) が必要です。(別売)

*アルミブロック(Bタイプ) に記載されていない穴形状サイズのブロックも別注にて製作致します。お問合せ下さい。

強力な小型精密アルミブロック恒温槽

ペルチェ素子を2個用いた、強力な小型タイプのブロック恒温槽です。サンプルの保冷・反応操作など幅広く対応。室温以下・室温付近の温度制御が可能。

CHT-101 外形図

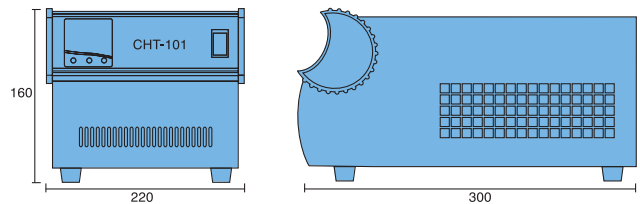

● ご使用用途 ● 各種酵素反応、サンプル保冷 他

オプションアルミブロック(Bタイプ) 別売


適用機種:

チルヒート CHT-101

チルヒート CHT-102HT

サーモアルミバス ALB-102

2槽式アルミバス ALB-301

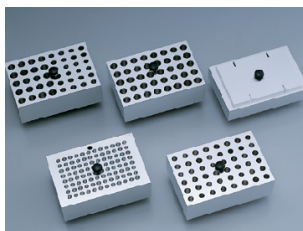

ブロック外寸法(mm) (W130×D90×H40)

型名	適用容器	穴数	穴深さ(mm)	価格(税別)
CHT100-B02	0.2mlマイクロチューブ*	96	15.5	38,000円
CHT100-CB	0.5ml+1.5mlマイクロチューブ 2サイズコンビネーション	24+20	24穴: 28 20穴: 38	38,000円
CHT100-B05	0.5mlマイクロチューブ	48	28	36,000円
CHT100-B40	1.5mlマイクロチューブ	40	38	28,000円
CHT100-BMP	平底96穴マイクロプレート	1枚架け		28,000円

*8連・12連チューブ、96穴PCRプレート (スカート無し) も取付け可能です。

*その他の穴形状サイズのブロックも別注にて製作致します。お問合せ下さい。