


ミキサー（マイクロチューブ／遠沈管 対応）

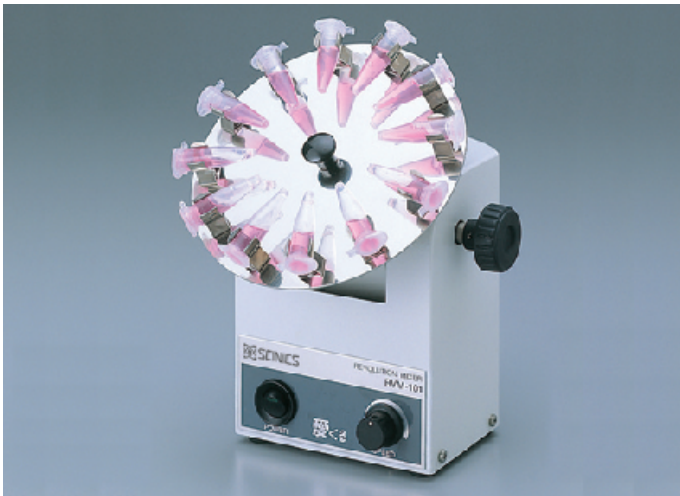

RVM-101 + オプション専用ホルダー RVM-MT12

DNA抽出・各種サンプルの低速での攪拌・反応に最適！
 恒温器に納まるサイズで機能性重視の小型巡回ミキサー
 目的・用途に合わせて回転スピードと角度設定が調節可能

小型巡回ミキサー”愛くる” RVM-101

回転数

2~12rpm

専用ホルダー(別売)

RVM-MT20
 マイクロチューブ
 1.5ml 20本架け(左)

RVM-TC15
 遠沈管15ml
 4本架け(右)


用途に合わせて自由に設定出来るホルダー角度

本体に装着したホルダーは0°~90°の範囲で用途に合わせて自由に設定できます。

常に安定した回転

定電圧制御+減速ギヤヘッドにより、あらゆる回転速度において力強く、常に安定した低速回転が得られます。
 長時間の緩やかな一定速度での攪拌作業に最適です。

仕様

型名	RVM-101
回転数 (rpm)	2~12
使用温度範囲(°C)	5~45
可変角度	0~90°(水平~垂直)
回転制御	定電圧制御+減速ギヤヘッド
外形寸法(mm)	W110XD100XH143 ※ホルダー装着時はW140XD140XH182 (但しホルダーの角度によってD122~140XH165~183)
重量(kg)	約1.6(ホルダー除く)
電源	AC100V 50/60Hz 0.1A
標準価格(税別)	59,000円

*オプション専用ホルダーは別売です。

恒温器内にスマートに納まるスマート巡回ミキサー

無駄を省いたコンパクト設計なのでお使いの恒温器にスッポリと納まります。(使用温度範囲にご注意ください。)

本体への着脱もスムーズな専用ホルダー(別売)

ホルダーの着脱は、真ん中のツマミを回しながら外して取付けるだけの簡単構造。1.5ml・2.0mlマイクロチューブ用、15ml/50ml遠沈管用など目的に合わせてお選び頂けます。

● ご使用用途 ●

DNAの抽出、各種サンプル・試薬の振とう
 恒温器内での攪拌培養等

オプション専用ホルダー：別売

小型巡回ミキサー RVM-101ご購入の際には合わせてお求め下さい。

適用機種：小型巡回ミキサー RVM-101

型名	適合容器	架数	標準価格(税別)
RVM-MT12	1.5mlもしくは2.0ml	12	7,500円
RVM-MT20	マイクロチューブ	20	11,000円
RVM-TC15	15ml遠沈管	4	7,500円
RVM-TC50	50ml遠沈管	2	

*ホルダーの架数変更・特注製作に応じます。

装着使用例



ホルダーRVM-MT12



ホルダーRVM-TC50