



手振りの抽出を機械で再現。
各種攪拌・前処理に最適！！

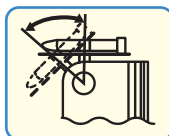

水平スタート

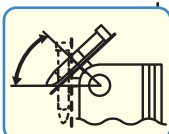

45度傾斜スタート

均一に
シェーク！

価格(税別)：¥82,000 ※専用ホルダー別売

SHK-COCK2 カクテルシェーカー

人の手でシェーキングする動作を再現

ハンドシェーキング作業を機械振りで再現。今までの疲れる手振りの攪拌作業を解消します。

攪拌角度がバラつかず、一定に保たれたシェーキングが行えます。

チューブ複数本の攪拌が可能

マイクロチューブ用0.5mlおよび1.5ml用、遠沈管用15mlおよび50ml用ホルダーを準備しておりますので、チューブによってお使いいただけます。

攪拌時間・スピード・傾斜角度が調節可能

攪拌時間を最大60分まで設定できるタイマー機能、任意の傾斜攪拌位置を手動で調節でき、攪拌スピードも目的に合わせて設定ができます。

用 途： フェノール抽出、各種酵素反応の前処理、試薬の調製など

SHK-COCK2 カクテルシェーカー 仕様

型 名	SHK-COCK2
攪拌スピード	60~180往復/毎分
攪 拌 角 度	45° (固定)
タイマー	0~60分・連続モード
攪 拌 位 置	ホルダーを水平より45° 傾けた間の任意の位置よりスタート
ホルダー寸法	W90 X D130(mm)
本 体 外 寸	W145XD150XH153(mm) (ホルダー装着時はH190)
電 源	AC100V 50/60Hz 0.04A
重 量	約2.1kg

SHK-COCK2 オプションホルダー

型 名	種類/適合容器	収納本数	価格(税抜き)
COCK-MT05	0.5mlマイクロチューブ	12	各¥7,700
COCK-MT15	1.5mlマイクロチューブ	12	
COCK-CT15	15ml遠沈管	3	
COCK-CT50	50ml遠沈管	2	

低速で回転攪拌。各種攪拌などに！！



価格(税別)：¥68,000 ※専用ホルダー別売

RVM-101

小型旋回ミキサー



スモールサイズ

無駄を省いたコンパクトな設計で、恒温器(5~45℃)にまるごと収納できます。

高い安定性

定電圧制御と減速ギヤヘッドによりあらゆる回転速度において力強く、常に安定した回転が得られます。

角度設定を自由に

ターンテーブルは0~90° の範囲で、用途に応じて設定が可能です。

ユニーク&スマートデザイン

人間とラボを考えた斬新でスマートなデザインは違和感なくどこでもフィットします。

用 途： 遺伝子研究室でのDNA抽出、各種震盪機として

RVM-101 愛くる 仕様

型 名	RVM-101
回 転 速 度	2~15rpm
回 転 制 御	定電圧制御+減速ギヤヘッド
角度可変範囲	0~90° (水平~垂直)
使用温度範囲	5~45℃
外 形 寸 法	W110 X D100 X H143 (ホルダー装着時はH182)
重 量	約1.5kg
電 源	AC100V 50/60Hz 0.07A

RVM-101 オプションホルダー

型 名	種類/適合容器	収納本数	価格(税抜き)
RVM-MT12	1.5mlもしくは2.0mlマイクロチューブ	12	¥7,700
RVM-MT20		20	¥12,000
RVM-TC15	15ml遠沈管	4	各¥7,700
RVM-TC50	50ml遠沈管	2	